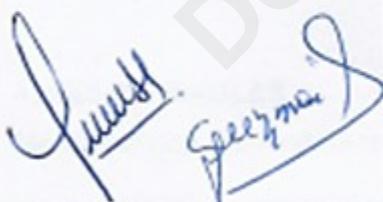




**PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA
Y TRANSPORTE HISOPADO NASO FARINGEO
COVID-19 HOSPITAL CLINICO
SAN FRANCISCO PUCON**

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Carolina Quinteros Torrent Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente Edith Guzman Mora DT Laboratorio Clínico</p>	<p>Susana Aravena Moraga Oficina Calidad y Seguridad del Paciente EU Catalina Cartes Servicio de Urgencia Stephanie Andana EU Centro Medico</p>	<p>Ricardo Alvear Leal Director</p>
<p>Firmas:</p> 	<p>Firmas:</p> 	<p>Firma:</p>  
<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>05/07/2021</p>	

Oficina de Calidad
y Seguridad
Hospital San Francisco Pucón

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS.....	3
3. ALCANCE.....	3
4. RESPONSABLES.....	3
5. REFERENCIAS.....	5
6. DEFINICIONES.....	5
7. DESARROLLO.....	6
8. REGISTRSO.....	13
9. DISTRIBUCIÓN.....	13
10. CONTROL DE CAMBIOS.....	13
11. ANEXOS.....	14

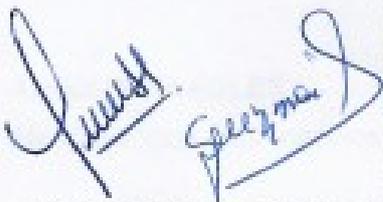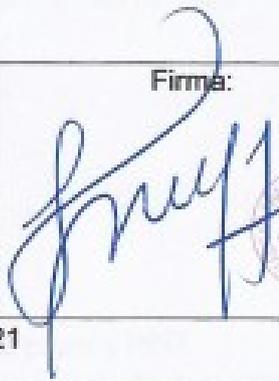Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Carolina Quinteros Torrent Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente Edith Guzman Mora DT Laboratorio Clínico</p>	<p>Susana Aravena Moraga Oficina Calidad y Seguridad del Paciente EU Catalina Cartes Servicio de Urgencia Stephanie Andana EU Centro Medico</p>	<p>Ricardo Alvear Leal Director</p>
<p>Firmas:</p> 	<p>Firmas:</p> 	<p>Firma:</p>  
<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>05/07/2021</p>	

 <p>HOSPITAL CLÍNICO SAN FRANCISCO · PUCÓN</p>	PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA Y TRANSPORTE HISOPADO NASO FARINGEO COVID-19 HOSPITAL CLINICO SAN FRANCISCO PUCON	Código: PRO 1.3.4
		Edición: Segunda
		Fecha: Junio 2021
		Vigencia: Junio 2026
		Página 3 de 19

1. INTRODUCCIÓN

Las muestras de HNF obtenidas en el HCSFP son transportadas al Hospital de Villarrica en una primera instancia a diario después de las 14:00 horas y posteriormente a Temuco para su procesamiento, debido a la centralización de la etapa analítica en la red asistencial.

Los costos asociados a errores en las etapas pre analíticas, de transporte, sumado a al doble sometimiento de pacientes al examen, exige supervisar los procesos y contar con procedimientos actualizados y detallados que faciliten la práctica clínica, sea un elemento de apoyo y para reducir la variabilidad de las prácticas y la posibilidad de presentar errores en ellos.

Este procedimiento está sometido a cambios que surjan de acuerdo a indicaciones de SSAS, de Dirección Médica de establecimiento o evolución de la pandemia, considerando siempre las estrategias, recomendaciones ministeriales y acuerdos entre establecimientos y redes asistenciales.

2. OBJETIVO GENERAL

Estandarizar el procedimiento de toma de HNF para examen de PCR para COVID-19 en el Hospital Clínico San Francisco de Pucón.

3. ALCANCE

- **Ámbito de aplicación:** A médicos, enfermeras, matronas, TENS y estafetas que estén involucrados en los procesos de toma de muestra de PCR para COVID-19 en el HCSFP.
- **Población de Aplicación:** A todo paciente que se le indique y tome una muestra de PCR para COVID-19 en el HCSFP.

4. RESPONSABLES

Médicos: Son responsables de

- Indicar la toma del examen PCR
- Completar el formulario de notificación obligatoria en formato papel y PFD
- Subir el formulario de notificación obligatoria de cada examen solicitado a la plataforma epivigila.

Enfermeras de Urgencia: Son responsables de

 <p>HOSPITAL CLÍNICO SAN FRANCISCO · PUCÓN</p>	PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA Y TRANSPORTE HISOPADO NASO FARINGEO COVID-19 HOSPITAL CLINICO SAN FRANCISCO PUCON	Código: PRO 1.3.4
		Edición: Segunda
		Fecha: Junio 2021
		Vigencia: Junio 2026
		Página 4 de 19

- Tomar la muestra de Hisopado nasofaríngeo según indicación medica
- Completar el formulario de notificación obligatoria formato papel y PFD
- Seguir los sistemas de registros definidos en este documento para el almacenamiento, transporte y seguimiento de resultados.
- Informar a Jefaturas cualquier inconveniente asociado al procedimiento.
- Mantener stock de material para PCR
- Supervisar y gestionar el regreso y/o recuperación de dispositivos de traslados de muestras (stock de coolers) del Hospital para garantizar el traslado de las muestras.

Enfermeras de Hospitalización: Son responsables de

- Tomar la muestra de Hisopado nasofaríngeo según indicación médica en sus servicios
- Completar el formulario de notificación obligatoria formato papel y PFD
- Seguir los sistemas de registros definidos en este documento para el almacenamiento, transporte y seguimiento de resultados.
- Informar a Jefaturas cualquier inconveniente asociado al procedimiento.

Matronas: Son responsables de

- Tomar la muestra de Hisopado nasofaríngeo según indicación médica en pacientes hospitalizados en el Servicio de Maternidad y Urgencia Gineco-obstetrica.
- Completar el formulario de notificación obligatoria formato papel y PFD
- Seguir los sistemas de registros definidos en este documento para el almacenamiento, transporte y seguimiento de resultados.
- Informar a Jefaturas cualquier inconveniente asociado al procedimiento.

TENS: Son responsables de

- Asistir a profesionales EU o matronas en la tomar la muestra de Hisopado nasofaríngeo de ser necesario
- Informar a Jefaturas cualquier inconveniente asociado al procedimiento.
- Colaborar en procedimientos de aseo y desinfección de EPP reutilizables y espacios.

Jefe Laboratorio: Es responsables de

- Coordinar semanalmente con centros nodos la adquisición de material necesario para la toma de muestras.
- Recibir los informes de resultados de muestras
- Liderar el procesos de traspaso de informes de resultados a sistemas de registros locales

Auxiliares de servicio: Son responsables de

- Realizar aseo terminal en espacios donde se tomaron muestras de hisopado nasofaríngeo

Funcionario a cargo de monitorear sistema informático epivigila: Es responsables de

 <p>HOSPITAL CLÍNICO SAN FRANCISCO · PUCÓN</p>	PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA Y TRANSPORTE HISOPADO NASO FARINGEO COVID-19 HOSPITAL CLINICO SAN FRANCISCO PUCON	Código: PRO 1.3.4
		Edición: Segunda
		Fecha: Junio 2021
		Vigencia: Junio 2026
		Página 5 de 19

- Monitorear el registro de cada muestra de hisopado obtenido en el Hospital en la plataforma electrónica y reportar este estado a Directivos.

5. REFERENCIAS

- <https://campusvirtual.araucaniasur.cl/>
- Flujo toma de muestras 1° edición HCSFP /2020
- Circulares sala de crisis

6. DEFINICIONES

APS: Atención primaria

Cadena de frío móvil: Compuesto por los contenedores o neveras portátiles (termos), que son utilizados para el transporte de vacunas.

Cesfam: Centro de Salud Familiar

Gel pack refrigerantes: Polímeros de alta densidad, reutilizable por largos período de tiempo, ya que se incorporan a su formulación agentes conservadores. Mantienen la temperatura dentro de unidades de transporte como termos o coolers. Son mantenidas en congeladores del laboratorio.

HCSFP: Hospital Clínico San Francisco de Pucón

MTV: Medio de transporte viral

SSASUR: Servicio de Salud Araucanía Sur

Termo o cooler: Recipiente en pequeñas dimensiones fabricado con paredes aislantes de poliuretano, con o sin revestimiento que se utiliza en el nivel operativo para transporte de vacunas o muestras biológicas. Según la calidad y manejo del termo pueden conservar temperaturas entre 4 y 48 horas.

7. DESARROLLO

Para la obtención de una muestra de HNF, se han definido diferentes contenedores de cada una de ellas, los que van agregándose uno a uno durante las distintas etapas del proceso de toma de PCR:

Tipo de contenedor	Detalle	Imagen referencial
--------------------	---------	--------------------

 <p>HOSPITAL CLÍNICO SAN FRANCISCO · PUCÓN</p>	PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA Y TRANSPORTE HISOPADO NASO FARINGEO COVID-19 HOSPITAL CLINICO SAN FRANCISCO PUCON	Código: PRO 1.3.4
		Edición: Segunda
		Fecha: Junio 2021
		Vigencia: Junio 2026
		Página 6 de 19

Contenedor primario	Corresponderá al tubo con MTV y la tórula con la Muestra del paciente.	
Contenedor secundario	Corresponderá a una cubierta plástica (bolsa pequeña transparente) en la cual se introducirá el tubo con la muestra del paciente, y está envuelto a su vez con papel absorbente (toalla papel).	
Contenedor terciario	Corresponderá a una bolsa biosegura o similar en la que se introducen varios contenedores secundarios.	
Cooler de transporte o termo	Corresponde a un dispositivo de poliuretano en el cual son transportadas las muestras de HNF hacia el lugar donde serán analizadas (HHHA). Éste debe manejarse bajo todos las normativas de cadenas de frio y aplican procedimientos de aseo y desinfección.	
Refrigerador muestras covid	Dispositivo de frio para el almacenamiento de muestras desde su toma hasta el envío a laboratorio de HHHA para su análisis. Ubicado en Box 4, respiratorio en el Servicio de Urgencia.	

7.1. Toma de Muestra

1.1. Insumos necesarios:

- 1 Tórula o hisopo de dacrón o polipropileno.
- 1 Tubo con medio de transporte MTV (contenedor 1°)
- 1 Bolsa plástica transparente pequeña (contenedor 2°)
- 1 hoja de papel absorbente
- Contenedor de material contaminado (residuos especiales)
- EPP: Guantes, pechera con mangas, o, protector facial o antiparras. mascarilla quirúrgica o KN95.

1.2. Personal necesario:

- Enfermera o matrona
- Asistencia de 1 TENS (optativo según aplique)

7.2. Procedimiento

- Se puede seguir complementariamente video explicativo <https://campusvirtual.raucaniasur.cl/>

2.1. Postura de EPP:

1. Lavado clínico de manos (30 segundos)
2. Colocarse Pechera con mangas

 <p>HOSPITAL CLÍNICO SAN FRANCISCO · PUCÓN</p>	PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA Y TRANSPORTE HISOPADO NASO FARINGEO COVID-19 HOSPITAL CLINICO SAN FRANCISCO PUCON	Código: PRO 1.3.4
		Edición: Segunda
		Fecha: Junio 2021
		Vigencia: Junio 2026
		Página 7 de 19

3. Instalación de Mascarilla quirúrgica
4. Instalación de Antiparras o protector facial
5. Postura Guantes

2.2 Recolección de la muestra: paso a paso

1. Preparación y chequeo de material a utilizar
 2. Informar al paciente el procedimiento a realizar.
 3. Preparar 2 rótulos de papel engomado (1 para tubo y otro para bolsa pequeña (contenedor secundario)).
 4. Ubicar al paciente, sentado con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás.
 5. Introducir la tórula o hisopo por el piso de la fosa nasal hasta tocar la pared posterior de la faringe, hacer girar suavemente la tórula en esa posición (al menos 3 giros), **la misma tórula se introduce en ambas fosas nasales (ya no se introduce tórula en orofaringe).**
 6. Colocar tórula con la muestra obtenida en el tubo con MTV cuidando que quede sumergida en el líquido.
 7. Cortar el borde de la tórula pre picada (viene por defecto)
 8. Cerrar cuidadosamente el tubo y cerciorarse que quede bien cerrado.
 9. Pegar 1° rotulo al tubo (pre-llenado al inicio)
 10. Envolver el tubo con papel absorbente (actuará como amortiguador)
 11. Introducir el tubo envuelto en papel absorbente en la bolsa plástica pequeña transparente (contenedor 2°)
 12. Cerrar y sellar la bolsa con tela adhesiva.
 13. Rotular la bolsa plástica con 2° rotulo
 14. Dejar la muestra en refrigerador ubicado en el sector del box 4.
 15. Retiro de EPP
 16. Eliminación de EPP en contenedor de residuos especiales (amarillo)
 17. Lavado clínico de manos
 18. Aseo terminal del box o área de toma de muestra.
- **Para muestras tomadas por Matronas y EU del Centro Médico se omite el punto 14, reemplazándolo por el depósito inmediato del contenedor 2° en cooler de transporte de esa Unidad.**
 - Aplica toma de muestras de PCR en Centro Medico a pacientes que se someterán a endoscopias y cirugías privadas.
 - Las muestras del Centro Medico se toman los días lunes y jueves después de las 14:00 horas, siendo trasladadas al día siguiente y procesado en laboratorio en convenio con el Hospital.
 - Estas muestras son conservadas en cadena de frio hasta su traslado.

2.3 Retiro EPP: el orden de retiro será

1. Pechera con mangas
2. Guantes
3. Lavado de manos clínico
4. Antiparras o protector facial
5. Mascarilla quirúrgica
6. Lavado de manos clínico

 <p>HOSPITAL CLÍNICO SAN FRANCISCO · PUCÓN</p>	PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA Y TRANSPORTE HISOPADO NASO FARINGEO COVID-19 HOSPITAL CLINICO SAN FRANCISCO PUCON	Código: PRO 1.3.4
		Edición: Segunda
		Fecha: Junio 2021
		Vigencia: Junio 2026
		Página 8 de 19

7.3. Requisitos de rotulación de la muestra

- Letra imprenta legible
- Consignar para rótulos (tubo y bolsa) :
 - Nombre
 - Dos apellidos
 - RUN
 - En caso de paciente extranjero consignar N° de pasaporte o DNI.

7.4. Conservación de muestras

- Cada contenedor secundario debe ser mantenido a temperatura de refrigeración (2 – 8 °C).
- El refrigerador de almacenamiento de las muestras de PCR es de uso exclusivo y se encuentra en el box 4 (box respiratorio).
- En él se centralizan todas las muestras tomadas en el servicio de Urgencia y Maternidad.
- Las muestras obtenidas en Centro Medico son almacenadas en cooler de la Unidad siguiendo el manejo de cadena de frio hasta su traslado por estafetas del Hospital los días martes y viernes am.

7.5 Sistemas de registros y Consideraciones Importantes de la Muestra

- Toda muestra va acompañada de un formulario impreso y digital (Anexo 1)
- Los formularios correspondientes son **obligatorios**
- Deben contener todos los antecedentes solicitados del paciente.
- En pacientes extranjeros y por nuevas variantes del virus debe registrarse DNI o N° de pasaporte, incluyendo la nacionalidad.
- Enfermera que toma la muestra anota la hora y fecha de la toma del examen en el formulario en versión PDF e impresa.
- Una EU del servicio (según dinámicas de cada turno) a diario verifica el N° de muestras, formularios en PDF e impresos previo al envío de las muestras para su procesamiento en el HHHA.
- Una vez chequeada y cuadrada esta información, envía los formularios en versión PDF a los siguientes destinatarios :
 1. laboratorio.hhha@asur.cl
 2. laboratoriopucon.covid@gmail.com
 3. macarena.bascunan@hospitalpucón.cl

 <p>HOSPITAL CLÍNICO SAN FRANCISCO · PUCÓN</p>	PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA Y TRANSPORTE HISOPADO NASO FARINGEO COVID-19 HOSPITAL CLINICO SAN FRANCISCO PUCON	Código: PRO 1.3.4
		Edición: Segunda
		Fecha: Junio 2021
		Vigencia: Junio 2026
		Página 9 de 19

- La dirección electrónica “ laboratoriopucon.covid@gmail.com” es recibida y administrada por Jefe de laboratorio del HCSFP, sin embargo informática tiene acceso a este mail para fines de alimentar a diario la planilla matriz de tomas de PCR, cuyo manejo se explica en el procedimiento de registros e informe de resultados examen PCR covid-19 HCSFP vigente.
- En el caso de las muestras tomadas por Matrona, quien realiza el procedimiento, completa el formulario en PDF, lo guarda e imprime.
- Las muestras de Maternidad son trasportadas junto con sus respectivos formularios impresos, por un TENS del servicio de Maternidad inmediatamente después de su toma al servicio de Urgencia en un cooler para ser almacenadas en el refrigerador de almacenaje de muestras de PCR en el box 4.
- La matrona que toma la muestra envía el formulario en versión PDF a los siguientes destinatarios:
 1. serviciourgenciahospitalpucon@gmail.com
 2. macarena.bascunan@hospitalpucón.cl
- El destinatario “macarena.bascunan@hospitalpucón.cl” ha sido definido a nivel local para fines de monitoreo de subida de información de los exámenes tomados a la plataforma digital epivigila. Aquellos formularios no subidos a la plataforma, son informados por este funcionario a medico designado por Dirección para regularizar situación.
- Las muestras tomadas en centro médico se asocian a los siguientes sistemas de registros:
 - Planilla manual de registros de PCR tomadas en Centro Medico.
 - Formulario de notificación obligatoria (digital)
 - Plataforma Epivigila (para subir el formulario obligatorio digital)
 - Plataforma toma de muestras Minsal (en este registro a cada muestra se le asigna un número de registro o “ID” , el cual debe ser enviado a través de correo electrónico al laboratorio del convenio para ser procesadas).

7.6 Transporte de la muestra

- APS de Pucón proporciona un móvil para esta actividad (coordinación intra-comunal)
- El móvil de APS Pucón llega al servicio de Urgencia de con las muestras propias a diario, reuniéndose finalmente las muestras del HCSFP, Curarrehue y APS Pucón para ser trasladadas hasta el Hospital de Villarrica.

	PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA Y TRANSPORTE HISOPADO NASO FARINGEO COVID-19 HOSPITAL CLINICO SAN FRANCISCO PUCON	Código: PRO 1.3.4
		Edición: Segunda
		Fecha: Junio 2021
		Vigencia: Junio 2026
		Página 10 de 19

- El Hospital Villarrica recibe estas muestras y envía también a diario al HHA. La recepción de muestras en el Hospital Villarrica se realiza a la salida de su servicio de Urgencia.
- HCSFP recibirá en el Servicio de Urgencia las muestras provenientes de los servicios clínicos, APS Pucón y Curarrehue como máximo hasta las 13:00 horas.
- El Hospital cuenta con un stock de cooler para transportar las muestras al HHA.
- Cada contenedor primario debe ir en posición vertical sellado herméticamente y rotulado con nombre completo y RUN del paciente, dentro de contenedor secundario en bolsa con papel absorbente. Ésta última rotulada con nombre completo y RUN del paciente.
- En el envase terciario (bolsa biosegura) se introducen varios contenedores secundarios. Todos previamente rotulados.
- Escribir en envase terciario:



Destinatario: Laboratorio Hospital HHA

Remitente: Hospital Clínico San Francisco Pucón (debe ser reforzada antes de su envío con tela).



- **Para el envío diario de muestras**, se deben imprimir los formularios PDF digitales de cada paciente e introducirlos en una bolsa plástica para resguardarlos de posibles derrames o en su defecto introducirlos en un bolsillo que tienen de fábrica cada bolsa biosegura.



Ejemplo: 10 tubos,
10 formularios

- Debe ir dentro del cooler de transporte con unidades refrigerantes suficientes para mantener la cadena de frío.
- Asegurar que las bolsas queden bien dispuestas y firmes dentro del cooler.



Cooler de transporte

	PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA Y TRANSPORTE HISOPADO NASO FARINGEO COVID-19 HOSPITAL CLINICO SAN FRANCISCO PUCON	Código: PRO 1.3.4
		Edición: Segunda
		Fecha: Junio 2021
		Vigencia: Junio 2026
		Página 12 de 19

Listado con muestras diarias del Hospital Pucón

Contenedor Final (En él se introduce cooler de poliuretano)

PLANILLA RESUMEN ENVIO COVID-19

SERVICIO QUE ENVÍA: Unjansa

FECHA TOMA MUESTRAS: 24/06/21 FECHA ENVIO A HHHA: 24/06/21

CANTIDAD DE MUESTRAS ENVIADAS:

CATEGORIZACION: (MARQUE UNA SOLA OPCION)	TIPO PROCESO	MARQUE X
	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	TESTEO FUNCIONARIOS
TESTEO PACIENTES		<input checked="" type="checkbox"/>
TESTEO PREQUIRURGICO		
TESTEO CONTACTO ESTRECHO		
TESTEO DIALISIS		
	TESTEO BAC	

PRIORIZACION (ENCIERRE CON PLUMÓN SEGÚN CORRESPONDA)

SI NO

TRAZABILIDAD HHHA (USO EXCLUSIVO HHHA)

N° CORRELATIVO:

Uso correcto de planilla:

- Adjunte una copia con todos los datos solicitados a cada contenedor 3río (cooler) enviado.
- Adjunte una segunda copia al set de formularios de las muestras enviadas en dicho contenedor.
- Se debe adjuntar una copia de este documento por cada contenedor enviado y en cada set de formularios.

Priorización de muestras



Disposición dentro del contenedor final

 <p>HOSPITAL CLÍNICO SAN FRANCISCO · PUCÓN</p>	PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA Y TRANSPORTE HISOPADO NASO FARINGEO COVID-19 HOSPITAL CLINICO SAN FRANCISCO PUCON	Código: PRO 1.3.4
		Edición: Segunda
		Fecha: Junio 2021
		Vigencia: Junio 2026
		Página 13 de 19

- Todo el material de reposición y unidades refrigerantes son guardados en sala toma de muestra hisopado Box 4 respiratorio, para posteriormente, en horarios de laboratorio se entreguen para preparación y congelamiento de unidades.
- Todos los dispositivos de transporte son sometidos post traslado a un procedimiento de limpieza y desinfección en el HHA.
- Al regreso, el Móvil de APS Pucón entrega el/los cooler al Hospital Pucón.
- Curarrehue retira sus cooler vacíos y limpios cuando trae nuevas nuestras al hospital Pucón.
- No usar tómulas de alginato de calcio o con ejes de madera, ya que pueden contener sustancias que inhiben las pruebas de PCR.
- **Corresponderá a laboratorio HCSFP hacer seguimiento de informe de resultados junto a equipo de Epidemiología** (Ver flujograma Procedimiento de registro y seguimiento de resultados Covid-19, Anexo 2)

Todos los resultados son consolidados y traspasados a una planilla local. Para más detalles ver Procedimiento de informe de resultados.
 Los resultados son informados mediante la plataforma digital del SSAS, los que son descargados por personal designado de nuestro Hospital y con clave de acceso.
 Los resultados positivos son enviados a la Jefe técnico de Laboratorio del HCSFP mediante alertas de resultados.

7.7 Aseo del lugar donde se toma una muestra y de contenedores

- Personal de servicio debe realizar un aseo terminal en cada box donde se toma una muestra de PCR.
- Los contenedores de residuos asociados a covid-19 también deben ser sujetos a limpieza y desinfección a cargo del personal de cada servicio.
- Los coolers de transporte de muestras de nuestro establecimiento son sometidos a procedimiento de limpieza y desinfección en una primera instancia en HHA y luego a un segundo proceso a su regreso (servicio de Urgencia). Esto incluye cooler y Unidades refrigerantes gel pack.

8. REGISTRO

- Formulario de notificación obligatoria

- Planilla resumen de envío diario de muestras y priorización a HHA
- Registro manual de Muestras PCR servicio de Urgencia
- Registro manual de Muestras PCR Centro Medico
- Plataforma digital epivigila
- Plataforma digital toma de muestras MINSAL

9. DISTRIBUCIÓN

- Oficina de Calidad y seguridad del Paciente
- Servicio de Urgencia
- Servicios de hospitalización
- Centro Medico

10. CONTROL DE CAMBIOS

 **Formulario notificación inmediata y envío de muestras a confirmación IRA grave y 2019-nCoV**
PR-244.00-007

N° Solicitud: _____ Actualizado: 05/02/2020 Versión: 2 Página 1 de 2

Información del Paciente

Rut: _____ Dirección: _____
 Nombres: _____ Región: _____
 Apellido Paterno: _____ Ciudad/Localidad: _____
 Apellido Materno: _____ Comuna: _____
 Sexo: Femenino Masculino Teléfono: _____
 Fecha Nacimiento: Día Mes Año Previsión: _____
 Edad: Años Meses Días

Datos de la Procedencia

Profesional Responsable: _____ Laboratorio/Hospital: _____
 Región: _____ Unidad: _____
 Provincia: _____ Correo Electrónico: _____
 Comuna: _____ Fono: _____
 Dirección: _____ Fax: _____

Antecedentes de la Muestra

Fecha de obtención: Día Mes Año Hora obtención:

Virus detectado localmente

Inmuno Fluorescencia: Influenza A Parainfluenza Establecimiento: _____
 Influenza B Metapneumovirus
 VRS Negativo
 Adenovirus

Test Pack: Influenza A Influenza B Negativo Establecimiento: _____

RT-PCR: Influenza A (H1N1) pdm Influenza B Establecimiento: _____
 Influenza A (H3N2) Negativo
Film Array: Influenza A no subtipificable Otro: _____

Tipo de Muestra: Lavado Broncoalveolar Biopsia o Tejido Pulmonar Otro (Tipo de muestra): _____
 Espudo
 Aspirado Traqueal
 Aspirado Nasofaríngeo
 Tórulas Nasofaríngeas

Antecedentes Clínicos/Epidemiológicos

Fecha inicio síntomas: Día Mes Año Fecha primera consulta: Día Mes Año

Trabajador avícola o granjas de cerdos Trabajador Embarazo Semanas gestación:

Viajó al extranjero en los 14 días previo al inicio de los síntomas

País: Ciudad:

 **Formulario notificación inmediata y envío de muestras a confirmación IRA grave y 2019-nCoV**
PR-244.00-007

N° Solicitud: _____ Actualizado: 05/02/2020 Versión: 2 Página 2 de 2

Síntomas

Fiebre sobre 38°C Cefalea
 Dolor de garganta Taquipnea
 Mialgia Hipoxia
 Neumonía Cianosis
 Encefalitis Deshidratación o rechazo alimentario (lactantes)
 Tos Compromiso hemodinámico
 Rinorrea/congestión Nasal Consulta repetida por deterioro cuadro respiratorio
 Dificultad Respiratoria Enfermedad de base
 Hipotensión

Especifique Enfermedad de base: _____

Antecedentes Vacunación

Vacuna contra influenza Fecha vacunación: Día Mes Año

Hospitalización

Hospitalizado Fecha Hospitalización: Día Mes Año

Grave VM ECMO Ingreso UCI VAFO
 Uso Antiviral Fecha inicio tratamiento: Día Mes Año Antiviral: Oseltamivir Zanamivir

Fallecimiento

Fallece Fecha Fallecimiento: Día Mes Año

Diagnóstico fallecimiento: _____


Instrucciones

1. Recepción Lunes a Jueves de 08:00 a 16:00 hrs. Viernes de 08:00 a 12:00 hrs.
 2. El transporte debe realizarse según **Normativa de transporte de muestras ISP**.
 3. En caso de dudas consultar a **Unidad de Recepción de Muestras (02) 5755187**




**FLUJOGRAMA DE REGISTRO E INFORME
DE RESULTADOS TOMA DE MUESTRAS COVID-19 HCSFP EN SERVICIOS DE URGENCIA**

PASO 1:

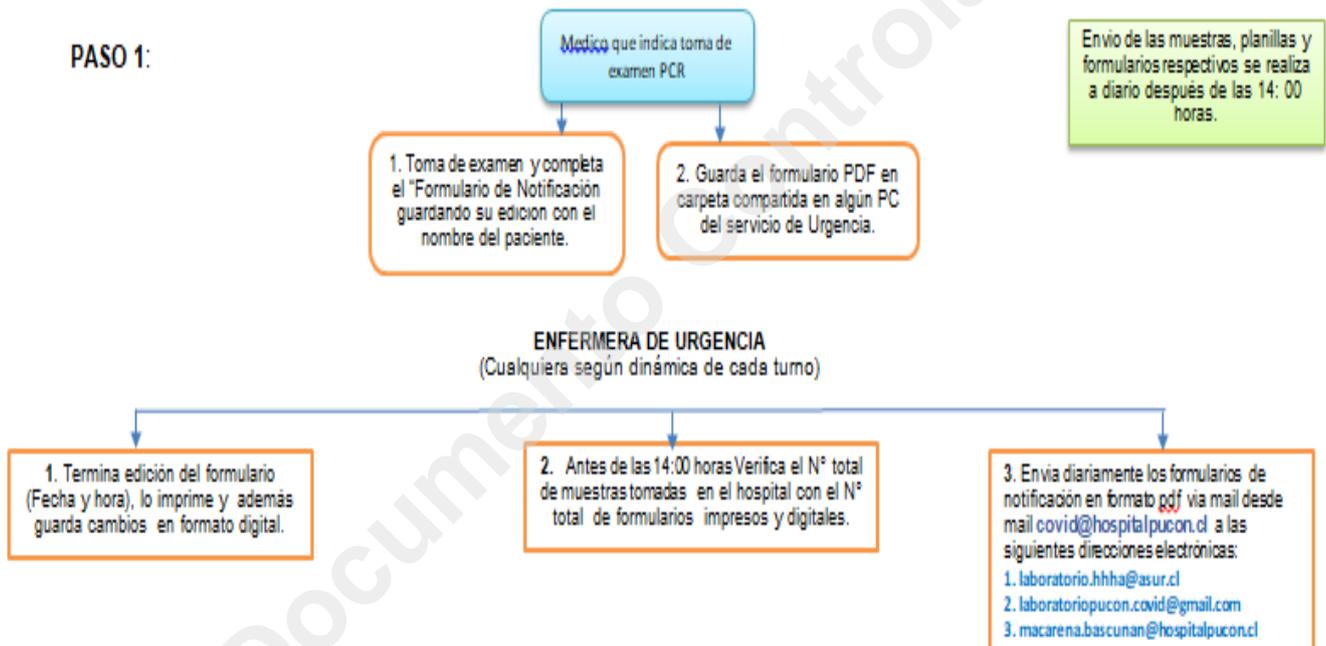


PASO 2:

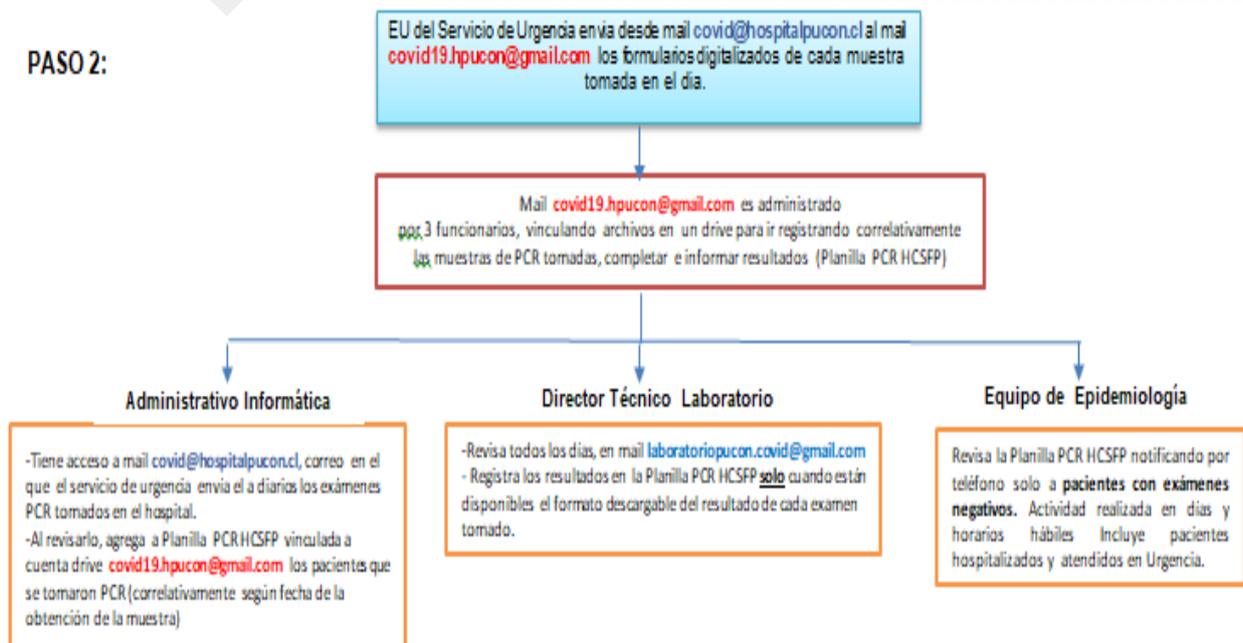




**FLUJOGRAMA DE REGISTROS E INFORME
DE RESULTADOS TOMA DE MUESTRAS COVID-19 HC SFP EN SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN**

PASO 1: edición y envío de formularios

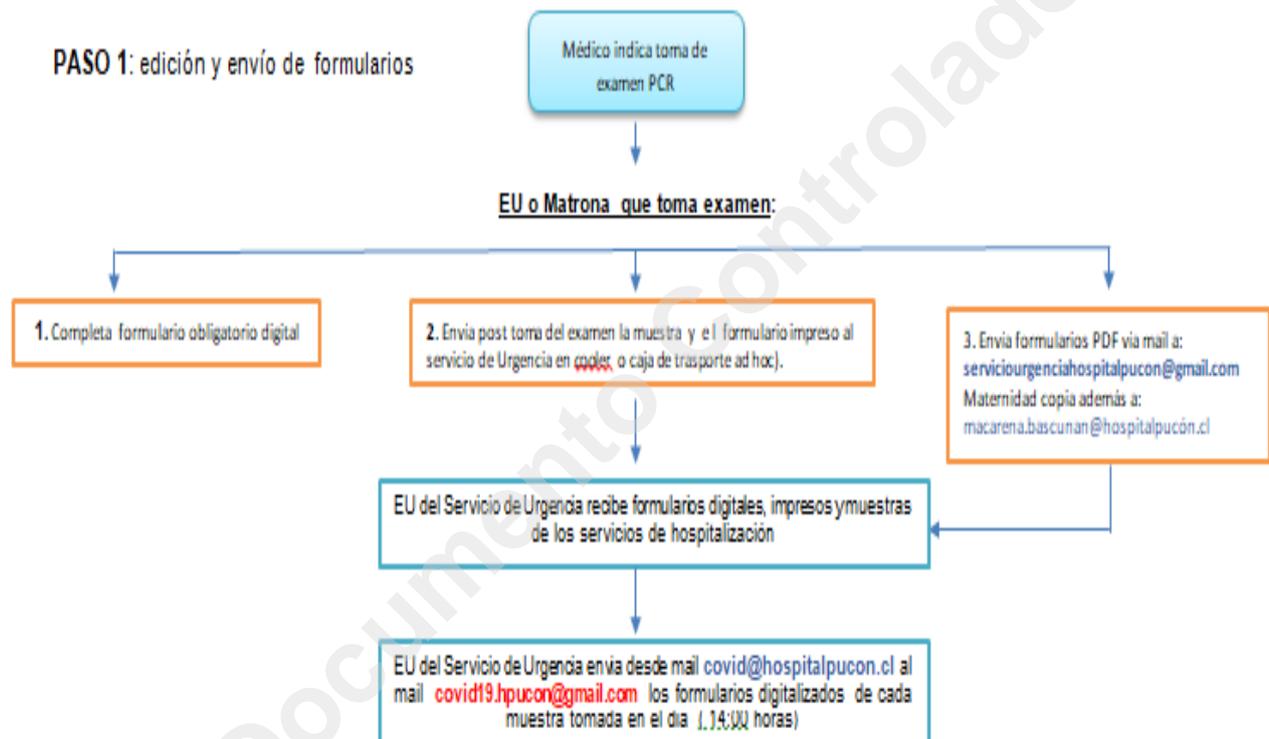

PASO 2: traspaso información de los formularios de cada muestra obtenida a planilla PCR hospital

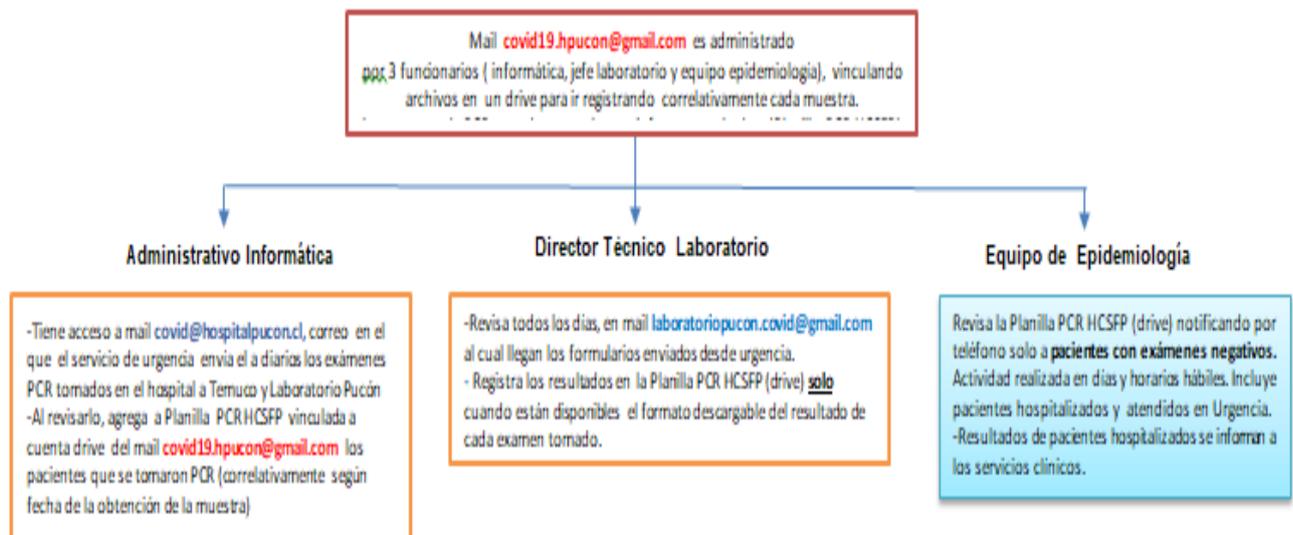

 <p>HOSPITAL CLÍNICO SAN FRANCISCO · PUCÓN</p>	PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRA Y TRANSPORTE HISOPADO NASO FARINGEO COVID-19 HOSPITAL CLINICO SAN FRANCISCO PUCON	Código: PRO 1.3.4
		Edición: Segunda
		Fecha: Junio 2021
		Vigencia: Junio 2026
		Página 17 de 19

11.3 ANEXO 3 : Listado –planilla resumen de muestras enviadas a diario a HV y HHHH.

 Ministerio de Salud Gobierno de Chile	SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL CLÍNICO SAN FRANCISCO DE PUCÓN TRAZABILIDAD DE PROCESOS COVID-19	 HOSPITAL CLÍNICO SAN FRANCISCO · PUCÓN
---	---	--

PLANILLA RESUMEN DE MUESTRAS ENVIADAS			
N°	NOMBRE	APELLIDOS	RUT
1	Micaela	Vergara Gomez	19.768.025-9
2	Juan	Barrera Reyes	18.327.424-5
3	Motson Andres	Topica Lemus	18.864.818-7
4	Rose Marie	Korpan Arriagada	13.887.808-8
5	Rose Vitale	Llanquiman Lobosilla	6.858.284-2
6	Edison Alexis	Alarcon Biveros	15.255.127-4
7	Lauren Brown	Sullivan Aways	22.863.064-K
8	OSCAR WATHAN	SULLIVAN AWAYA	23.781.632-1
9	ABEL ANDRES	MARTINEZ AUSA	20.414.234-1
10	ROSAITA	Covillan Panaloff	7.009.764-8
11	VERONICA	Ucunao Caviglio	7.153.905-9

